


Producent: COOKGAS LLC

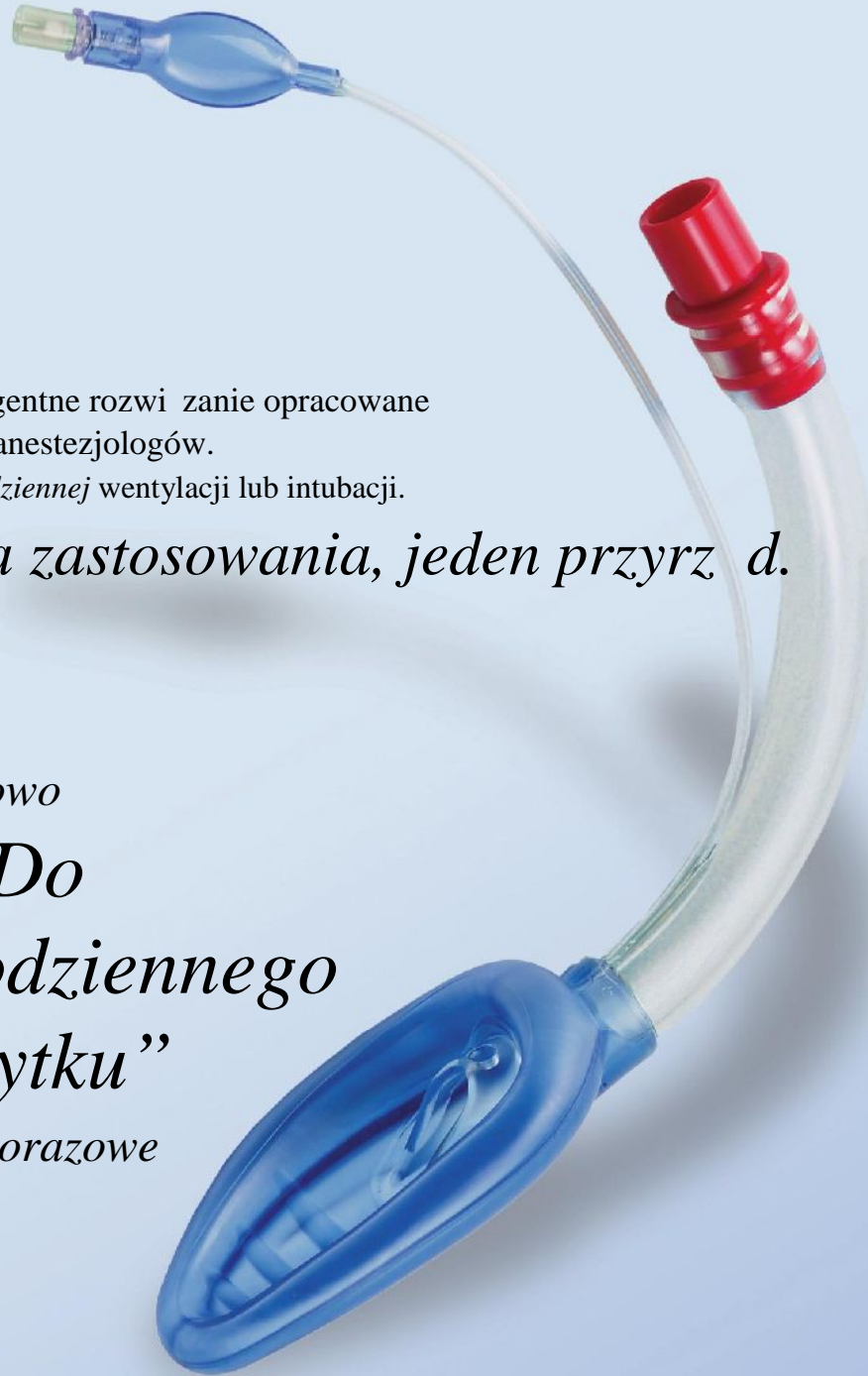

Inteligentne rozwiązanie opracowane
przez anestezyjologów.
Do codziennej wentylacji lub intubacji.

Dwa zastosowania, jeden przyrząd.

Nowo
“Do
codziennego
użytku”
Jednorazowe

air-Q

Historia metod udra niania dróg oddechowych
obfituje we wspaniałe pomysły.

air-Q to rozwinięcie, które zmienia podejście do
problemu udra niania dróg oddechowych.



Nowa maska krtaniowa *codziennego użytku* charakteryzuje się specjalną opatentowaną konstrukcją, która obejmuje między innymi zdejmowany oznaczony odpowiednim kolorem wskaźnik, umożliwiając bezproblemowe wprowadzanie standardowych rurek intubacyjnych przy *codziennym* zachowaniu pełnej drożności dróg oddechowych.

Maska wykonana jest z PCV, nie zawiera ftalanów DEHP, posiada przezroczysty korpus i mankiet oraz uwypukloną kopułę.



air-Q . . . *Inteligentne rozwiązanie,*
które ułatwia wprowadzanie i wyjmowanie rurek ustno-tchawiczych.

*Metoda udra niania dróg oddechowych **codziennego użytku**, która stanowi wszechstronne rozwiązanie.*

air-Q *the airway the smart way*

Cechy:

- Innowacyjna Konstrukcja Mankietu - o obrotowym zamknięciu ... zapobiega zaginaniu maski, umożliwiając szybsze wprowadzanie.
- Dodatkowy otwór
- Owalny, wygodny kształt rurki ustno-tchawiczej
- Wylot rurki o kształcie dziurki od klucza
- Brzegi maski

Zalety:

- ... poprawia przepływ powietrza i zapobiega zapadaniu się nagłośni.
- ... bardziej anatomiczna konstrukcja, która ułatwia wprowadzanie.
- ... kieruje radek osi rurki ustno-tchawiczej ku wlotowi tchawicy, ułatwiając intubację.
- ... poprawia uszczelnienie z przodu.

Przedstawiamy również następujący nowy produkt: *air-Vu* . . .

*wziernik światłowodowy
do ledzenia położenia rurki dotchawiczej
podczas intubacji.*



Opcjonalne ródła światła

Nowy dodatek do linii produktowej *air-Q*TM

Nowy wzornik *air-Vu*TM posiada podobne wygięcie jak *air-Q*, co ułatwia jego wprowadzanie.

Ten sztywny wzornik wykorzystuje technologię światłowodową, umożliwiając bezproblemowe ledzenie procesu wprowadzania rurki ustno-tchawiczej, ułatwiając jej aplikację.

Wykorzystując zaawansowaną technologię światłowodową, można na bieżąco wzrokowo monitorować proces wprowadzania rurek dotchawiczych i ich drogę pomiędzy strunami głosowymi.

Nowa konstrukcja i doskonałe właściwości wzornika *air-Vu* czyni z niego instrument z wyboru ułatwiający wykonanie nawet najtrudniejszej intubacji.



air-Q i air-Vu
partnerzy w udra nianiu
dróg oddechowych



air-Q™

to inteligentne rozwiązanie, które zapewnia łatwe usuwanie rurek intubacyjnych.

Biorąc pod uwagę całe zagadnienie udrańniania dróg oddechowych, problem usuwania rurek intubacyjnych należy traktować równie poważnie jak ich wprowadzanie.

System **air-Q** jest oferowany ze zgłbnikiem do usuwania rurek.



Dzięki opatentowanej konstrukcji zgłbnik stabilizuje (ustywnia) już wprowadzoną rurkę ustno-tchawiczą i umożliwia kontrolowane wyjmowanie rurki **air-Q** bez usuwania uprzednio wprowadzonej rurki intubacyjnej z tchawicy.

- Stoek umożliwia zgłbnikowi dopasowanie się do standardowych doustnych rurek ustno-tchawiczych o wielu rozmiarach (4,0 - 8,5).
- Krawędzie zajął się z rurką ustno-tchawiczą tworzą solidne, stabilne połączenie, zapewniając użytkownikowi pełną kontrolę nad rurką podczas jej wyjmowania.
- Rozpórki umożliwiają pewniejszy chwyt zgłbnika podczas wykonywania obrotowych ruchów podczas wprowadzania.



Artykuł#	Rozmiar	Opis	Ilość	Waga pacjenta
#10-3010	air-Q 1,0	Jednorazowa krtaniowa rurka intubacyjna 1 szt.	10/opakowanie	do 7 kg
#10-3015	air-Q 1,5	Jednorazowa krtaniowa rurka intubacyjna 1 szt.	10/opakowanie	7 - 17 kg
#10-3020	air-Q 2,0	Jednorazowa krtaniowa rurka intubacyjna 1 szt.	10/opakowanie	17 - 30 kg
#10-3025	air-Q 2,5	Jednorazowa krtaniowa rurka intubacyjna 1 szt.	10/opakowanie	30 - 50 kg
#10-3035	air-Q 3,5	Jednorazowa krtaniowa rurka intubacyjna 1 szt.	10/opakowanie	50 - 70 kg
#10-3045	air-Q 4,5	Jednorazowa krtaniowa rurka intubacyjna 1 szt.	10/opakowanie	70 - 100 kg
#10-3036	air-Q 3,5	Zestaw jednorazowy ze strzykawką 10cm i rodkiem zwi kształcym po lizg	10/opakowanie	50 - 70 kg
#10-3046	air-Q 4,5	Zestaw jednorazowy ze strzykawką 10cm i rodkiem zwi kształcym po lizg	10/opakowanie	70 - 100 kg
#10-3040	Zestaw	Dwa - 2,5, Cztery - 3,5, Cztery - 4,5 air-Q, Rozmiar 0, zgłbniki rozmiar 1, rodek zwi kształcym po lizg, 1szt. -strzykawka 10cm		
#10-1000	dla rurki oddechowej 3,5 & 4,5	Zgłbnik wielorazowy. Rozmiar #1	1/opakowanie	
#10-1003	dla rurki oddechowej 2,5 & 1,5	Zgłbnik wielorazowy, Rozmiar #0	1/opakowanie	
#10-1012	2,5	Łącznik rurki oddechowej		10/opakowanie
#10-1013	3,5	Łącznik rurki oddechowej		10/opakowanie
#10-1014	4,5	Łącznik rurki oddechowej	10/opakowanie	
#10-2025	do czyszczenia ILA 2,5	Szczotka do czyszczenia ILA	10/opakowanie	
#10-2035	do czyszczenia ILA 3,5/4,5	Szczotka do czyszczenia ILA	10/opakowanie	
air-Vu™ Rigid Fiber Optic Laryngoscope				
#EK-3000GLMM	Sztynny wziernik światłowodowy air-Vu		1/szt.	
#EK-30200	Załącznik do wymiany rurki, Doro li		1/szt.	
#EK-30410	Konektor do połączenia tlenu		1/szt.	
#EK-5197200	ródło światła Ultralight LED		1/szt.	
#53-5-0236-08	Uchwyt Greenline®Mini Penlite (chromowany mosiądz)		1/szt.	
#53-5-0236-10	Uchwyt Greenline®Penlite		1/szt.	