



MEDRAD® Mark 7 Arterion®

My dostarczamy kontrast,
a Ty najwyższą jakość
opieki nad pacjentem

System Mark 7 Arterion® – ergonomia i funkcjonalność



ergonomiczny uchwyt

specjalny wkład
ładowany
od przodu

pozwalający na szybki
montaż i sterylne
usuwanie

o 16% lżejsza
głowica wstrzykiwacza*

o 32% lżejszy statyw*

łatwa zmiana położenia i mobilność

intuicyjny
interfejs
użytkownika

łatwa obsługa

opływowy
kształt statywu

wygoda stosowania


o 20% mniejsza
podstawa*

*w porównaniu z MEDRAD Mark V ProVis®

Wstrzykiwacz automatyczny Mark 7 Arterion® – najnowszy model wstrzykiwaczy angiograficznych z serii „Mark”

Mark 7 Arterion®

- ergonomiczny kształt statywu – ułatwiony dostęp do pacjenta
- przejrzysty i intuicyjny interfejs (wbudowana instrukcja obsługi – krok po kroku) – szybka i poprawna konfiguracja urządzenia
- ładowanie wkładu od przodu – prosty montaż i ułatwiona wymiana z zachowaniem zasad aseptyki
- mniejsza podstawa i lżejsza głowica – mobilność i wygoda stosowania
- możliwość zastosowania trybu zmiennego przepływu (Variable Flow) – regulacja prędkości przepływu środka kontrastowego dzięki zastosowaniu kontrolera ręcznego

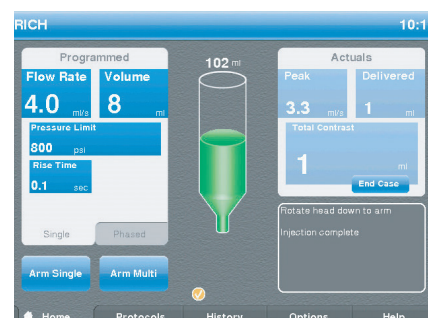

Przejrzysty i kolorowy interfejs użytkownika

- wyróżnienie najpotrzebniejszych informacji
- możliwość przechowywania w pamięci urządzenia do:
 - 40 protokołów badań
 - 50 poprzednich iniekcji
- polskie menu



Jednorazowy sterylny wkład

- wykonany z przezroczystego tworzywa
- łatwa obserwacja wnętrza pod kątem występowania pęcherzyków powietrza
- pola wskaźnikowe FluiDots® – zmiana kształtu pod wpływem napełnienia wkładu
- system „Twist&Go” – szybkie i łatwe mocowanie drenu przy pomocy jednej ręki



System Mark 7 Arterion® – opcje montażu



Wbudowany monitor

Zwiększona funkcjonalność urządzenia

Opcjonalnie we wszystkich systemach

Podgrzewacz kontrastu

Możliwość utrzymania temperatury środka kontrastowego na stałym poziomie



Mocowanie do stołu

Niewielki rozmiar zasilacza pozwala na elastyczność mocowania, pod stołem zabiegowym lub w pomieszczeniu sterującym



Mocowanie do sufitu

Opcja mocowania na suficie pozwala przesunąć głowicę wstrzykiwacza podczas iniekcji



Dopasuj Mark 7 Arterion® do swoich potrzeb dzięki akcesoriom

Podwójny wyświetlacz

Dodatkowy ekran pozwalający na maksymalną elastyczność pracy w pomieszczeniu zabiegowym i sterującym

DANE TECHNICZNE SYSTEMU

Zakres przepływu:	0,1-45,0 ml/s w odstępach 0,1 ml 0,1-59,9 ml/min w odstępach 0,1 ml
Objętość:	1-150 ml w odstępach 1 ml
Limit ciśnienia (strzykawka 150 ml):	100-1200 psi w odstępach 1 psi 689-8273 kPa w odstępach 1 kPa
Czas narastania:	0,0-9,9 sekundy w odstępach 0,1 s
Opóźnienie iniekcji:	0,0-99,9 sekundy w odstępach 0,1 s
Szybkość napełniania:	1-20 ml/s
Zakres objętości napełniania:	1-150 ml
Pojemność wkładu strzykawki:	150 ml
Pamięć protokołów:	40 protokołów
Pamięć poprzednich iniekcji:	50 iniekcji



Wytwórca
Bayer Medical Care Inc.
1 Bayer Drive
Indianola, PA 15051-08780, USA
Tel.: +1 (412) 767-2400
+1 (800) 633-7231
Faks: +1 (412) 767-4120
Radiology.bayer.com
Healthcare.bayer.com

Dystrybutor w Polsce
Bayer Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa
Polska
Telefon: +48 (22) 5723500
Faks: +48 (22) 5723555

CE 543532

Firma Bayer zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i właściwości opisanych w niniejszej broszurze oraz do zaprzestania produkcji wyrobu w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia i ponoszenia odpowiedzialności. W celu uzyskania aktualnych informacji należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem Bayer. Bayer, Bayer Cross i MEDRAD są znakami towarowymi spółek należących do grupy Bayer. © 2015 Bayer

L.PLMKT04.2016.3838