



Bezkompromisowa wentylacja  
w czasie transportu

DRÄGER  
OXYLOG® 3000 PLUS

# Sprostaj wyzwaniom



## Wentylacja najwyższej jakości dostępna w każdej chwili

Nieważne czy znajdujesz się w szpitalu, czy też w terenie, skuteczna terapia jest wynikiem pracy zespołowej. Profesjonaliści pracują razem, aby ratować życie, zgodnie ze znanym łańcuchem wydarzeń: od działań ratunkowych i ustabilizowania do diagnozy, od leczenia do wyleczenia i ostatecznie wypisania z ośrodka. Jednakże łańcuch tych zdarzeń jest jedynie tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo. Z różnych przyczyn, pacjenci są najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo w czasie transportu. Utrzymanie najwyższego możliwego standardu wentylacji, niezależnie od warunków – również podczas transportu, bardzo często stanowi o różnicy pomiędzy polepszeniem a pogorszeniem się stanu pacjenta.



### OXYLOG 3000 PLUS – NIEZAWODNY, KOMPAKTOWY, WYTRZYMAŁY

Firma Dräger podjęła wyzwanie i jeszcze bardziej podniosła poprzeczkę w dziedzinie wentylacji w czasie transportu. Opierając się na ponad 100 latach doświadczenia w dziedzinie wentylacji mechanicznej, stworzyliśmy urządzenie, które w poręcznej, solidnej obudowie daje możliwość prostego i intuicyjnego korzystania z najwyższej klasy wentylacji mechanicznej. Możesz teraz zapewnić swoim pacjentom, dzieciom i dorosłym, najwyższy poziom wentylacji, zawsze i wszędzie.

### OXYLOG® 3000 PLUS

<b>Tryby wentylacji</b>	VC-CMV, VC-AC, VC-SIMV, SpnCPAP, PC-BIPAP (PC-SIMV+)
<b>Ustawienia dodatkowe</b>	NIV i AutoFlow, wentylacja przy bezdechu, wspomaganie ciśnieniowe PS
<b>Opcje*</b>	AutoFlow, kapnografia, eksport danych w czasie rzeczywistym
<b>Żywotność akumulatora</b> (nowy akumulator, w pełni naładowany, wentylacja „typowa”, bez czujnika pomiaru CO <sub>2</sub> , zmniejszona jasność wyświetlacza)	Okolo 9,5 godziny
<b>Żywotność akumulatora</b> (nowy akumulator, w pełni naładowany, wentylacja „typowa”)	Okolo 7,5 godziny
<b>Masa</b>	Okolo 5,8 kg (urządzenie z akumulatorem wewnętrznym)

\* Wyposażenie opcjonalne można zamówić wraz z urządzeniem lub też w późniejszym okresie.

# Wentylacja najwyższej jakości w czasie transportu

## DOSKONAŁA WENTYLACJA

- Szeroki zakres trybów wentylacji kontrolowanych ciśnieniowo i objętościowo
- Regulowana czułość zakończenia fazy wdechu oraz wentylacja przy bezdechu
- Niskie zużycie tlenu ponieważ przepływ podstawowy nie jest wymagany

## WENTYLACJA NIEINWAZYJNA

- Synchronizacja z pacjentami oddychającymi spontanicznie
- Wentylacja pacjenta z automatyczną kompensacją przecieku

## AUTOFLOW® (OPCJA)

- Wentylacja najwyższej jakości w celu zminimalizowania ciśnienia w drogach oddechowych
- Zastosowanie możliwe we wszystkich trybach kontrolowanych objętościowo

## ZINTEGROWANA KAPNOGRAFIA (OPCJA)

- Czujnik pomiaru CO<sub>2</sub> w strumieniu głównym zapewnia krótki czas reakcji i funkcjonalność plug & play
- Zintegrowane monitorowanie: etCO<sub>2</sub> i krzywe

## PRZYSTOSOWANY DO WENTYLACJI DZIECI

- Dokładna wentylacja o objętości oddechowej od 50 ml
- Dedykowane pediatryczne układy oddechowe





### ZAAWANSOWANE MONITOROWANIE

- Nieprzerwane wyświetlanie danych liczbowych oraz krzywych
- BTPS oraz automatyczna kompensacja wysokości

### ZARZĄDZANIE DANymi (OPCJA)

- Transfer danych w czasie rzeczywistym
- Funkcja zdalnego serwisowania do przesyłania informacji o urządzeniu do DrägerService

### PROSTE DZIAŁANIE

- Krótki czas uruchomienia, bez potrzeby kalibracji czujnika przepływu
- Bardzo czytelny wyświetlacz i intuicyjny interfejs użytkownika

### MOBILNOŚĆ I UDOWODNIONA ODPORNOŚĆ

- Proste, ale skuteczne systemy mocowania zwiększają bezpieczną eksploatację
- Mocny akumulator zapewniający do 9,5 godziny niezależnej pracy

### SZEROKI ZAKRES AKCESORIÓW

- Dostępność standardowych akcesoriów Dräger do rodziny Oxylog
- Uchwyt ścienny, systemy transportowe, wózki i wiele więcej

# Nowe standardy w wentylacji podczas transportu



Wybierając Oxylog 3000 plus, wybierasz urządzenie, którego potrzebujesz w dniu dzisiejszym i które jednocześnie przygotowane jest do rozbudowy w przyszłości. Pełny zakres trybów wentylacji kontrolowanych ciśnieniowo i objętościowo, w połączeniu z NIV, wspomaganie ciśnieniowym, płynną regulacją stężenia O<sub>2</sub> oraz wentylacją przy bezdechu umożliwiają terapię wysokiej jakości i dają poczucie pewności w czasie transportu.

Dzięki zaawansowanym funkcjom, Oxylog 3000 plus ustala nowe standardy w dziedzinie wentylacji oraz pomaga, bardziej niż kiedykolwiek, sprostać wyzwaniom nowoczesnej wentylacji podczas transportu.

- Wentylacja podczas transportu wewnątrz i na zewnątrz szpitala
- Kompleksowe leczenie w nagłych wypadkach i w czasie transportu
- Nieprzerwana wentylacja najwyższej jakości
- Bezkompromisowa wentylacja podczas transportowania pacjentów
- Ulepszone i skuteczniejsze wykorzystanie w szpitalu
- Serwis respiratora raz na dwa lata

## Akcesoria

MT-0575-2/007




### MASKI PEŁNOTWARZOWE CLASSICSTAR® NIV

Firma Dräger oferuje szeroką gamę akcesoriów, dedykowanych do respiratora Oxylog 3000 plus. Pełnotwarzowe maski ClassicStar NIV przeznaczone są do prowadzenia wentylacji nieinwazyjnej. Dzięki poduszce wypełnionej powietrzem, maski te mogą być indywidualnie dopasowane do twarzy pacjenta, co zapewnia skuteczne leczenie.

## Szkolenia

9067073

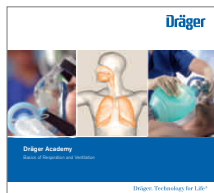


### AKADEMIA DRÄGERA – PODSTAWY ODDYCHANIA I WENTYLACJI

Jak dokładnie odbywa się proces oddychania? Co dzieje się, gdy człowiekowi rzeczywiście „brak powietrza“ i musi być wentylowany? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań dotyczących oddychania i wentylacji można uzyskać w programie Dräger eLearning.

## Materiały edukacyjne

9066314

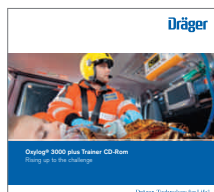

### SYMULATOR RESPIRATORA OXYLOG® 3000 PLUS

Firma Dräger wspiera Twoją codzienną kliniczną pracę ofertą szkoleń przez Internet. Nasz interaktywny trener dostarczy przydatnych informacji o respiratorze Oxylog 3000 plus, dzięki którym w prosty sposób nauczysz się intuicyjnej obsługi i dowiesz się, w jaki sposób urządzenie funkcjonuje.

## Usługa serwisowa

D-322436-2/011



### DRÄGERSERVICE – BO LICZY SIĘ JAKOŚĆ

Spełniamy Twoje wymagania, dzięki odpowiednim usługom serwisowym: począwszy od kontroli i zapobieganiu, a skończywszy na pełnym pakiecie usług. Łatwo dostosujemy się do Twoich indywidualnych potrzeb.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie [www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**CENTRALA**

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lubeka, Niemcy

[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**Producent:**

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lubeka, Niemcy

**POLSKA**

Dräger Polska Sp. z o.o.  
ul. Sułkowskiego 18a  
85 - 655 Bydgoszcz  
Tel +48 52 346 14-33 (-34, -35)  
Fax +48 52 346 14-37  
[info.polska@draeger.com](mailto:info.polska@draeger.com)

Znajdź lokalnego  
przedstawiciela  
handlowego na stronie:  
[www.draeger.com/kontakt](http://www.draeger.com/kontakt)

