

Leaseir MHR

LASER DIODOWY WYSOKIEJ MOCY



Leaseir

www.leaseir.com

Single
810nm

Dual
810nm

Quad
810nm

Technologia



LASER DIODOWY WYSOKIEJ MOCY

Główce o mocy 2000 W / 4000 W



PEŁNA MOC PRZY CZĘSTOTLIWOŚCI 4HZ

Do 40 J/cm² w trybach automatycznych 30ms, 100ms oraz 400ms



WYMIENNA GŁOWICA ZABIEGOWA

Łatwa zmiana



SYSTEM CHŁODZENIA

Końcówka laserowa stale schłodzona do temperatury 0°C. Wydajny wewnętrzny system chłodzenia, pozwalający na utrzymanie w gabinecie zabiegowym stałej temperatury nawet do 28°C.



INTUICYJNY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA Z WBUDOWANYM WI-FI

Wygodny, dotykowy 15 calowy ekran LED. Dzięki naturalnemu przepływowi informacji między użytkownikiem, urządzeniem oraz chmurą danych system zbiera i prezentuje dane statystyczne zabiegów.



Wszystkie typy skóry





4000 W

4Hz



Platforma do usuwania owłosienia o najwyższej mocy na rynku - pozwala pracować na parametrach $40\text{J}/\text{cm}^2$ z częstotliwością 4Hz i czasem 30ms.

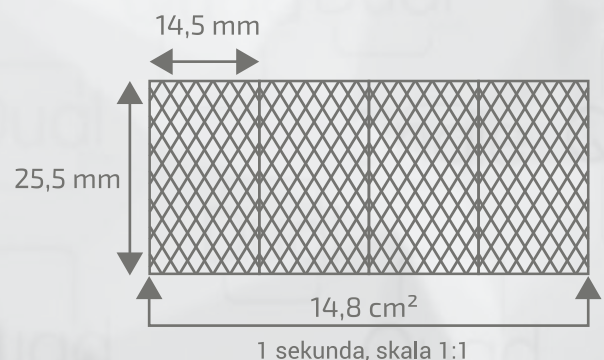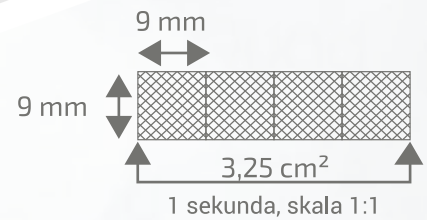

Ergonomiczne głowice, wygodny przycisk nożny oraz praktyczny design urządzenia sprawiają, że platforma Leaseir MHR jest komfortowa w użytkowaniu.

Leaseir MHR umożliwia zabiegi na dużych obszarach skóry z częstotliwością 4Hz, utrzymując temperaturę końcówki 0°C z gęstością mocy i trybami pracy rekomendowanymi w badaniach klinicznych.

☺ Szacunkowy czas epilacji nóg (5000 cm^2)

	Single	Dual	Quad
Wielkość plamki	$0,81\text{ cm}^2$	2 cm^2	$3,7\text{ cm}^2$
Częstotliwość: 4Hz	3,24	8	14,8
Czas (sekundy)	1.543	625	338
Czas (minuty)	26	10	6
Czas zabiegu	30-35 min	15-20 min	10-15 min

Technologia

Zwiększ swoją efektywność pracy.



W Leaseir MHR procedury pracy są zoptymalizowane przez nowoczesny, i intuicyjny interfejs użytkownika.

Wszystkie zaznaczone parametry sesji wyświetlane są na jednym, czytelnym ekranie.



15 calowy, dotykowy ekran LED z filtrem antyodblaskowy można obsługiwać także w gumowych rękawiczkach.

Rezultaty



Zabiegi Leaseir MHR trwają krótko, są bezbolesne dla pacjenta oraz dostarczają wiele satysfakcji dzięki skutecznej i szybkiej pracy.

“ *We acquired the Leaseir equipment for our clinics because it offers us the highest speed and power in different work modes. I am delighted with the equipment, not only for its performance, but for the result and the efficiency of the hair removal.*

It is remarkable to see the reduction in hair density after each session. Moreover, the powerful cooling system is outstanding and makes hair removal painless. ”

Dr Rafael Calatayud
Manager of Calatayud Clinics

“ *In Dermoestetica Affectum we took the decision to acquire Leaseir Single platform and it has been the appropriate decision, as results have shown extraordinary. Single is a platform that provides all the requirements that we were looking to offer to our customers, the best hair removal system with great power, security and best results.*

Thanks to its powerful refrigeration system the pain feeling is lower than in any other system, as well as the different modes that allow a secure and efficient hair removal to different customer profiles. ”

José Jiménez
Manager of Dermoestetica Affectum

Analiza biznesowa



Statystyka dostarczana przez naturalny przepływ informacji między użytkownikiem, platformą oraz chmurą danych online.

Dostęp do statystyki wszędzie i zawsze



Leaseir MHR dostarcza program podłączony do Wi-Fi, dzięki któremu można analizować dane z każdego zabiegu.

System pozwala na rejestrowanie wszystkich zaznaczonych parametrów dla każdego użytkownika i każdego numeru referencyjnego historii klinicznej.

Dzięki posiadaniu pełnej statystyki wykonanych zabiegów, jesteśmy w stanie analizować efektywność oraz opłacalność zabiegów, użytkowników czy gabinetów klinicznych.

Specyfikacja techniczna

AKCESORIA

CHŁODZENIE KOŃCÓWKI	0° do 3C
WYMIARY PLATFORMY	Wysokość 110cm, Szerokość 45cm, Głębokość 57cm
WAGA	50,5 Kg
WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE	15°-28°C / 0-90% wilgotności / 90-110 KPa
KLASA LASERA	4 według normy EN60825-1

SPECYFIKACJA PLATFORMY

Single

Dual

Quad

CZĘSTOTLIWOŚĆ	1 do 4 Hz oraz 10 Hz w trybie SP		
WYMIARY PLAMKI	9 X 9 mm	13,5 X 15 mm	14,5 X 25,5 mm
DŁUGOŚĆ FALI	810 nm		
GĘSTOŚĆ MOCY	40 J/cm ² , 30 ms / 60 J/cm ² , 400 ms		
SZEROKOŚĆ IMPULSU	2 to 400 ms		1 to 400 ms
MOC SZCZYTOWA	2000 W	4000 W	

INNA SPECYFIKACJA

Gwarancja serwisowa na diody laserowe

Brak kosztów zużycia: bez materiałów eksploatacyjnych, nosków czy światłowodów

Własne wsparcie serwisowe

Zaprojektowany i produkowany w Hiszpanii

NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANY LASER DIODOWY
DYSPONUJĄCY NAJWYŻSZĄ MOCĄ NA RYNKU



In **Leaseir Medical Light** we have been at the forefront of laser diode technology for over 18 years. We are committed with the clinics and practices to deliver them a platform that gives them the ability to get the results that the patients demand.

Our main aim is to offer quality products, and for that reason our platform excels the standards of the required medical trails for devices in their categories.



Leaseir



LM&NT

OFICJALNY DYSTRYBUTOR

**LASERS, MICROWAVES
AND NEW TECHNOLOGIES**

Kłobucka 23
02-699 Warszawa
502 481 069, 515 526 525,
info@lm-nt.pl