




Stalowa płyta ochronna
do testów kontroli jakości
w mammografii

model:

HPOSM_3

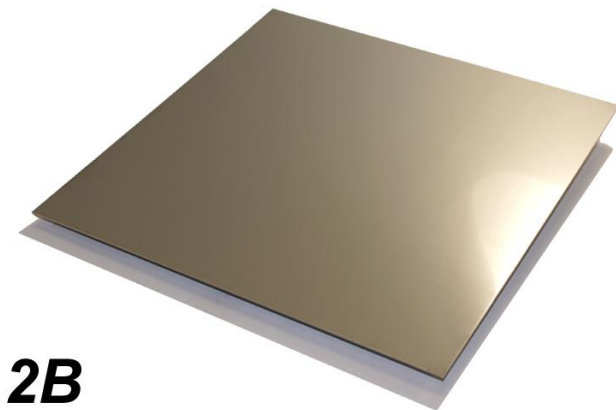

Płyta grubości 3 mm jest wykonana z nierdzewnej stali gatunku 340 wykończenie B2 (półmat), podklejona irchą. Zgodnie z suplementem do European Protocol ed. 4. Płyta jest wyposażeniem do podstawowych i specjalistycznych testów kontroli jakości w mammografii projekcyjnej i tomosyntezie (DBT).

Płyta stalowa nierdzewna o rozmiarach 320 x 260 x 3 [mm] jest przeznaczony do przystaniania całej powierzchni detektora cyfrowego w stoliku mammograficznym. Dla zabezpieczenia stolika przed porysowaniem płyta podklejona została warstwa ekoirchy a krawędzie płyty zostały zaokrąglone i oszlifowane.

Producent i dystrybutor:

HIMTECH Norbert Wasilewski, Warszawa
tel. +48602108829, e-mail: info.himtech@gmail.com

nr. katalogowy **HPOSM_3**

Płyta HPOSM_3 **spełnia wszystkie wymagania dyrektywy europejskiej:**
Dyrektywa 92/59 EWG Bezpieczeństwo Produktów Powszechnego Użytku
(92/59/EEC General Product Safety Directive)