


Myjnie dezynfektory serii Professional Line

Myjnia AF 2.60 P



Duża ładowność, skuteczność i efektywność

- Duża ekonomiczna ładowność. Możliwość mycia i dezynfekcji 1 kaczki i basenu z pokrywą lub 4 kacek w jednym cyklu.
- Stelaż uniwersalny - załadunek szerokiej gamy naczyń sanitarnych: basenów, kacek, nocników dziecięcych, dużych misek, sło, wiader
- Bezpieczny i higieniczny przebieg procesu: opróżnianie naczyń przy zamykaniu drzwi komory, płukanie i mycie naczyń, schładzanie wodą zdezynfekowaną, suszenie
- Dezynfekcja termiczna – temperatura dezynfekcji powyżej 90°C. Wbudowana elektryczna wytwornica pary
- Elektroniczny system kontroli temperatury
- Systemy oszczędzające zużycie wody, energii elektrycznej oraz detergentów
- Wersja manualna - otwieranie ręczne lub
- wersja automatyczna - obsługa bezdotykowa
- Oznakowanie CE zgodnie z dyrektywą o produktach medycznych 93/42/EEC, zgodność z normą EN ISO 15883-1/3

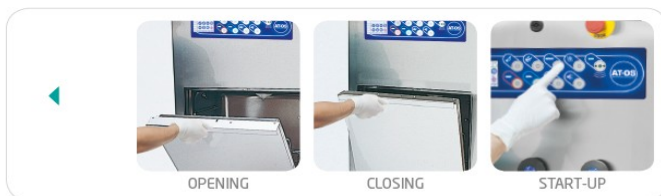

OPENING

CLOSING

START-UP

Wersja manualna

Wersja automatyczna



OPENING

CLOSING/START-UP

Niezawodność i komfort użytkowania

- Wersja manualna z ręcznym otwieraniem i zamykaniem drzwi komory lub wersja automatyczna gdzie obsługa myjni może odbywać się całkowicie bezdotykowo za pomocą pedału nożnego lub czujnika optycznego.
- Standardowe suszenie termiczne. Opcjonalnie dostępne suszenie wymuszonym strumieniem powietrza.
- Mikroprocesorowe zarządzanie urządzeniem, programy w pełni automatyczne z możliwością dostosowania do indywidualnych potrzeb użytkownika. Inteligentny system raportowania o błędach.
- Gładki panel sterowania z przyciskami dotykowymi, odporność na ścieranie, uszkodzenia oraz środki dezynfekcyjne. Kolorowy wyświetlacz graficzny LCD, informujący o przebiegu programów i funkcjach urządzenia. Wszystkie komunikaty w języku polskim.
- Urządzenie wykonane w całości z materiałów odpornych na działanie korozji. Drzwi, komora mycia, panele zewnętrzne, rama ze stali nierdzewnej AISI 304. Komora myjąca wykonana ze stali kwasoodpornej AISI 316.
- Specjalny układ i konstrukcja dysz myjących pozwalających na osiągnięcie doskonałych efektów mycia.
- Duży wybór akcesoriów i koszy wsadowych
- Pompa dozująca płynne środki chemiczne - dozowanie automatyczne, pełna kontrola ilości podawanych środków chemicznych. Opcjonalnie dostępna druga pompa detergentu.

Bezpieczeństwo

- System ETS (Emptying Total System) Całkowite opróżnianie instalacji hydraulicznej po każdym cyklu
- Automatyczna dezynfekcja podczas każdego cyklu pracy. Dodatkowy system SDS (Self Disinfection System) automatyczne uruchamianie programu dezynfekcji w przypadku postoju urządzenia przez okres 24 h
- Czujnik drożności odpływu zatrzymujący pracę urządzenia w przypadku zablokowania odpływu
- Blokada drzwi przez cały cykl oraz w przypadku awarii
- Akustyczne i wizualne alarmy bezpieczeństwa. Informacje o błędzie / usterce wyświetlane na panelu sterowania w języku polskim
- Autoryzowany serwis producenta

Dane techniczne

- Wymiar wersja stojąca szer x gł x wys 600 x 450 x 1650 [mm]
- Wymiar wersja podblatowa szer x gł x wys 900 x 600 x 860/1000 [mm]
- Odpływ kanalizacji uniwersalny (podłogowy lub ścienny)
- Urządzenie przystosowane do pracy z wodą nieuzdatnioną zimną i ciepłą - Przyłącza wody 1/2", 3/4"G

Inne modele serii Professional Line