


Myjnie dezynfektory serii Professional Line

Myjnia AF 2.60I/WC P



Duża ładowność, skuteczność i efektywność

- Duża ekonomiczna ładowność. Możliwość mycia i dezynfekcji 1 kaczki i basenu z pokrywą lub 4 kaczek w jednym cyklu.
- Stelaż uniwersalny - załadunek szerokiej gamy naczyń sanitarnych: basenów, kaczek, nocników dziecięcych, dużych misek, słoje, wiader
- Bezpieczny i higieniczny przebieg procesu: opróżnianie naczyń przy zamykaniu drzwi komory, płukanie i mycie naczyń, schładzanie wodą zdezynfekowaną, suszenie
- Dezynfekcja termiczna – temperatura dezynfekcji powyżej 90⁰C. Wbudowana elektryczna wytwornica pary
- Elektroniczny system kontroli temperatury
- Systemy oszczędzające zużycie wody, energii elektrycznej oraz detergentów
- Wersja manualna - otwieranie ręczne lub
- wersja automatyczna - obsługa bezdotykowa
- Oznakowanie CE zgodnie z dyrektywą o produktach medycznych 93/42/EEC, zgodność z normą EN ISO 15883-1/3

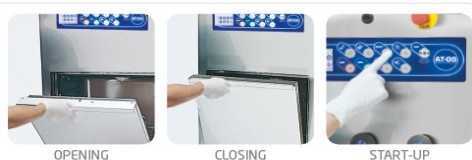

Wersja manualna

Zestaw zawiera:

- **Rama montażowa do zabudowy** wykonana ze stali nierdzewnej z podłączeniami do mocowania toalety, syfonem 110 mm, z wbudowanym zbiornikiem wody WC „GEBELIT”, węzłami przyłączeniowymi wody ciepłej i zimnej
- Wymiary ramki w ścianie: szer. 720 mm, gł. 585 mm, wys. 2250 mm.

- **Myjnia dezynfektor** - zgodna z poniższymi parametrami



Parametry myjni dezynfektora : *Niezawodność i komfort użytkownika*

- Wersja manualna z ręcznym otwieraniem i zamykaniem drzwi komory, opcjonalnie dostępna wersja automatyczna.
- Standardowe suszenie termiczne (konwekcyjne). Opcjonalnie dostępne suszenie wymuszonym strumieniem powietrza.
- Mikroprocesorowe zarządzanie urządzeniem, programy w pełni automatyczne z możliwością dostosowania do indywidualnych potrzeb użytkownika. Inteligentny system raportowania o błędach.
- Gładki panel sterowania z przyciskami dotykowymi, odporność na ścieranie, uszkodzenia oraz środki dezynfekcyjne. Kolorowy wyświetlacz graficzny LCD, informujący o przebiegu programów i funkcjach urządzenia. Wszystkie komunikaty w języku polskim.
- Urządzenie wykonane w całości z materiałów odpornych na działanie korozji. Drzwi, komora mycia, panele zewnętrzne, rama ze stali nierdzewnej AISI 304. Komora myjąca wykonana ze stali kwasoodpornej AISI 316.
- Specjalny układ i konstrukcja dysz myjących pozwalających na osiągnięcie doskonałych efektów mycia.
- Duży wybór akcesoriów i koszy wsadowych, wersje ze zlewem i umywalką, profesjonalne systemy zabudowy
- Dwie pompy dozujące płynne środki chemiczne (zmiękcacz/nabłyszczacz i detergent) - dozowanie automatyczne, pełna kontrola ilości podawanych środków chemicznych.

Bezpieczeństwo

- System ETS (Emptying Total System) Całkowite opróżnianie instalacji hydraulicznej po każdym cyklu
- Automatyczna dezynfekcja podczas każdego cyklu pracy. Dodatkowy system SDS (Self Disinfection System) automatyczne uruchamianie programu dezynfekcji w przypadku postoju urządzenia przez okres 24 h
- Czujnik drożności odpływu zatrzymujący pracę urządzenia w przypadku zablokowania odpływu
- Blokada drzwi przez cały cykl oraz w przypadku awarii
- Akustyczne i wizualne alarmy bezpieczeństwa. Informacje o błędzie / usterce wyświetlane na panelu sterowania w języku polskim
- Autoryzowany serwis producenta

Dane techniczne

- Wymiar AF 2.60l/WC P: Szer. mm 600 (720 w obudowie) Gł. mm 450 (585 w obudowie) Wys. mm 2210 (2250 w obudowie)
- Urządzenie przystosowane do pracy z wodą nieuzdatnioną zimną i ciepłą - Przyłącza wody 1/2", 3/4"G
-

Inne modele serii Professional Line

